

MedCubes – First Steps

Die ersten Schritte zum Arbeiten mit MedCubes.

Inhalt des Dokuments

Um neuen MedCubes-Nutzern den Einstieg so einfach wie möglich zu gestalten, soll dieses Dokument alle notwendigen Informationen und Anleitungen zum erstmaligen Anmelden in MedCubes bereitstellen. Benötigen Sie dennoch unsere direkte Unterstützung, blättern Sie bitte bis zum Ende des Dokuments.

Notwendige Anmeldungs-Informationen

Um mit MedCubes arbeiten zu können, wurden folgende Informationen durch das MedCubes-Team für Sie bereitgestellt. Diese Daten werden üblicherweise einem Verantwortlichen in Ihrem Unternehmen per Email übermittelt.

Element	Beschreibung
URL / Link	Internet-Adresse des MedCubes-Servers auf dem Ihre Umgebung gehostet wird (z.B. https://cloud.medcubes.com).
Benutzername	Der zur Anmeldung verwendete Benutzername. Jede MedCubes-Lizenz ist mit einem Benutzernamen verbunden.
Passwort	Ein vorläufiges Passwort wurde bereitgestellt. Dieses sollten Sie bei der ersten Anmeldung ändern.

Richtigen Browser verwenden

Verwenden Sie den  **Microsoft Internet Explorer** und folgen Sie dem Link den Sie vom MedCubes-Team erhalten haben, oder geben Sie die URL manuell ein.

Wird ein anderer Browser verwendet (z.B. Microsoft Edge), so werden Sie folgende Information sehen:

This browser is not supported. Please use Internet Explorer to access MedCubes!

Silverlight installieren


MedCubes verwendet  **Microsoft Silverlight** für die Darstellung von Steuerelementen. Dieses Add-On zum Internet Explorer muss aktiviert werden um mit MedCubes arbeiten zu können. Sofern Silverlight noch nicht aktiviert oder installiert wurde, werden Sie folgende Information sehen:

This browser is not supported. Please use Internet Explorer to access MedCubes!

Etwas unterhalb dieses Textes finden Sie aber einen Bereich zum Herunterladen und Installieren von Silverlight. Bitte scrollen Sie deshalb zum Ende der Seite und folgen Sie der Anleitung:




Erscheint diese Meldung obwohl Silverlight bereits installiert wurde, müssen Sie womöglich dieses Add-On in den Einstellungen des Internet Explorers aktivieren (Einstellungen → Add-Ons verwalten):

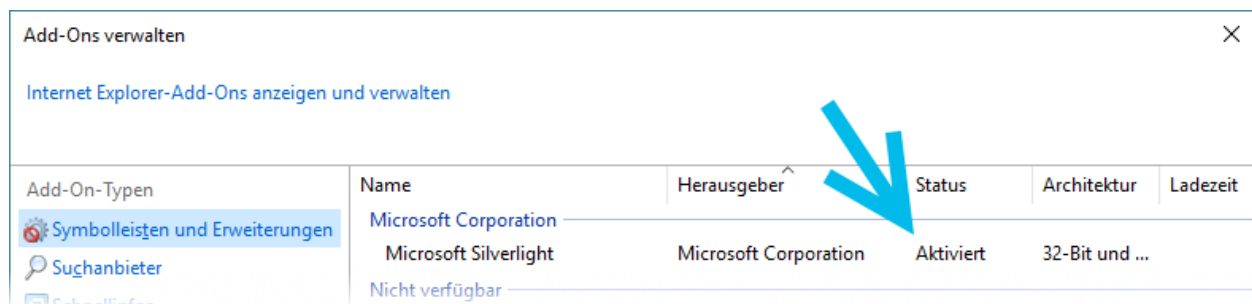


Silverlight "Arbeitsspeicher" freigeben

Um mit MedCubes arbeiten zu können benötigt Silverlight einen **reservierten Arbeitsspeicher**, den Sie bei der ersten Anmeldung freigeben müssen:

Information

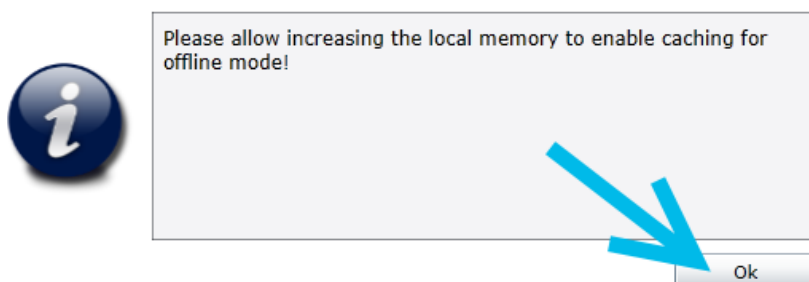

Bestätigen Sie bitte diese Dialoge um den benötigten Speicherplatz für Silverlight freizugeben:

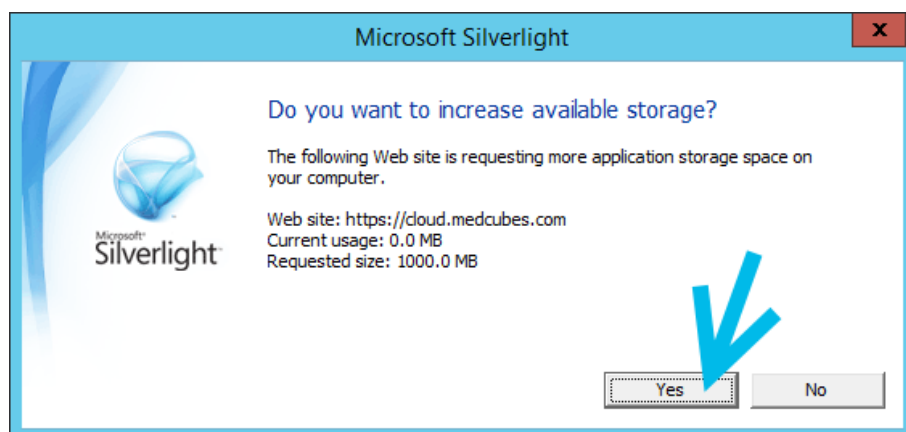

Es werden nun einige Programmdateien für MedCubes geladen, dies kann einige Minuten dauern abhängig von der Verbindungsgeschwindigkeit zum Server. Diese Daten werden **nur beim erstmaligen Einstieg** bzw. nach Auslieferung eines **neuen Programmstands** in MedCubes geladen - wenn Sie das nächste Mal MedCubes verwenden wollen, ist dieser Schritt nicht mehr notwendig.




Elevated trust für MedCubes

MedCubes unterstützt Funktionen, die auf die **lokalen Ressourcen** Ihres Rechners zugreifen, um etwa Dateien zu speichern oder hochzuladen, Dokumente zu drucken oder zu scannen, oder auf Funktionen einer angeschlossenen Kamera zuzugreifen. Um diese Funktionen über Silverlight nutzen zu können muss, ist MedCubes für "elevated trust" zertifiziert.

Um elevated trust für MedCubes zu aktivieren, laden Sie bitte dieses  **Windows Installer-Paket** herunter und führen Sie es auf ihrem Rechner aus:

<http://download.ahcs.co/MedCubes/msi/Download.html>



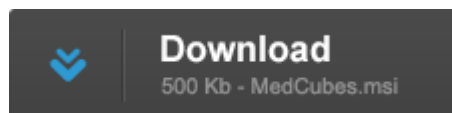


Wenn Sie sich in MedCubes anmelden bevor Sie elevated trust aktiviert haben, werden Sie nach der Anmeldung aufgefordert zur oben beschriebenen Download-Seite zu gehen um das Installer-Paket herunterzuladen.

Achtung: Nach der Installation müssen Sie den Internet Explorer **neu starten!**

Windows Installer für elevated trust

Folgen Sie den Anleitungen des Installer-Pakets um elevated trust für MedCubes zu aktivieren.

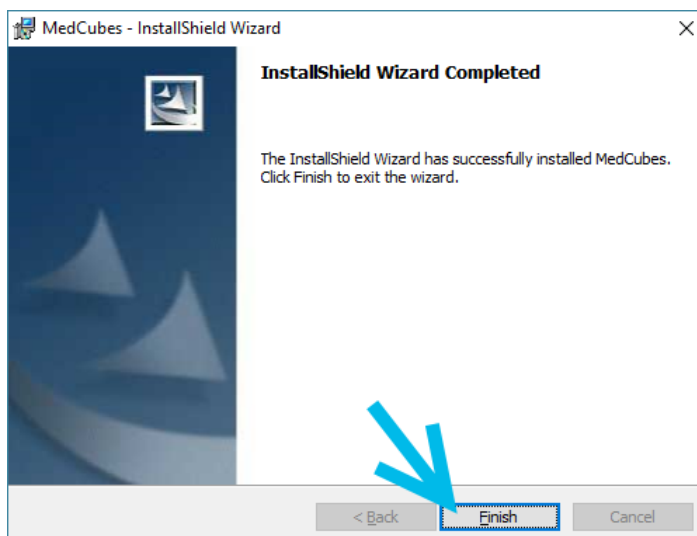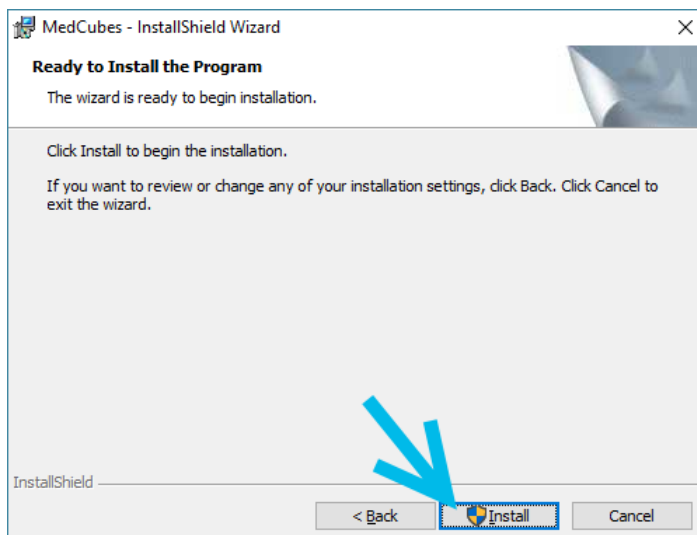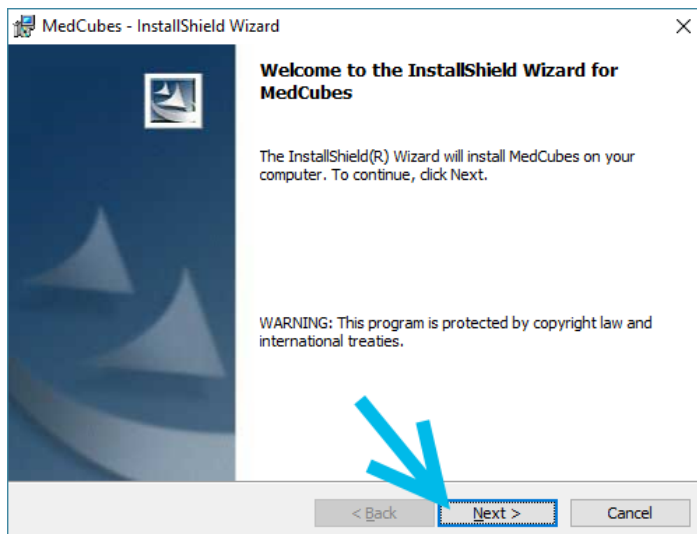

Achtung: Nach der Installation müssen Sie den Internet Explorer **neu starten!**

Anmeldung in MedCubes

Sie können sich nun erstmals in MedCubes arbeiten Anmelden. Bitte verwenden Sie die für Sie bereitgestellten Anmeldungs-Informationen (Benutzername und Passwort).

Anmeldung

Benutzername:

Passwort:

[Passwort ändern](#)

Anmeldung
Abbrechen

©AHCS AG. Data presented is for information purposes only (i.e. xray images do not have diagnostic quality)

Arbeitsumgebung auswählen (optional)

Abhängig von der Konfiguration Ihrer MedCubes-Umgebung stehen Ihnen nach der Anmeldung mehrere Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Sofern keine Auswahlmöglichkeiten für Ihren Benutzer existieren, wird dieser Schritt übersprungen.

Auswahl der Arbeitsumgebung

Kunde:

MedCubes

Mandant:

MedCubes WoundManagement

Profil:

Administrator

Desktop:


Stammdaten

Anmeldung
Abbrechen

Element	Beschreibung
Kunde	Der Name Ihres Unternehmens (meist keine Auswahl möglich)
Mandant	Ein Kunde kann aus mehreren Einrichtungen bestehen, die jeweils ihren eigenen Mandanten in MedCubes haben können (z.B. Kliniken, Behandlungszentren).
Profil	Die Berechtigungen in MedCubes werden über Profilsysteme verwaltet. Ein Profil entspricht meist einer Personengruppe oder Rolle im Unternehmen.
Desktop	Für jeden Aufgabenbereich kann ein eigener Arbeitsplatz vorbereitet sein. Dieser beinhaltet all jene Apps (Programme und Funktionen), die für Ihre arbeiten benötigt werden.

Erinnerung um elevated trust für MedCubes zu aktivieren (optional)


Wenn Sie sich in MedCubes anmelden bevor Sie elevated trust aktiviert haben, werden Sie nach der Anmeldung aufgefordert zur der im Kapitel "Elevated trust für MedCubes" (Seite 3) beschriebenen Download-Seite zu gehen um das Installer-Paket herunterzuladen.

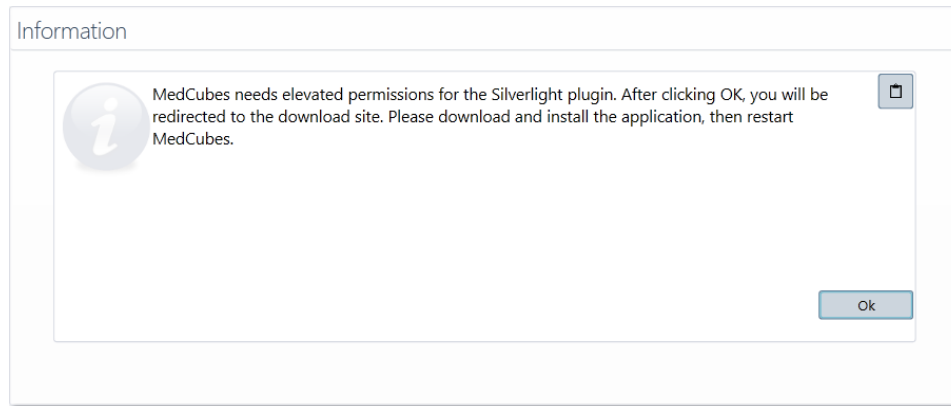

Achtung: Nach der Installation müssen Sie den Internet Explorer **neu starten!**

Gratulation!

Sie haben somit die ersten Schritte gemacht! Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude und Erfolg mit Ihren Arbeiten in MedCubes.

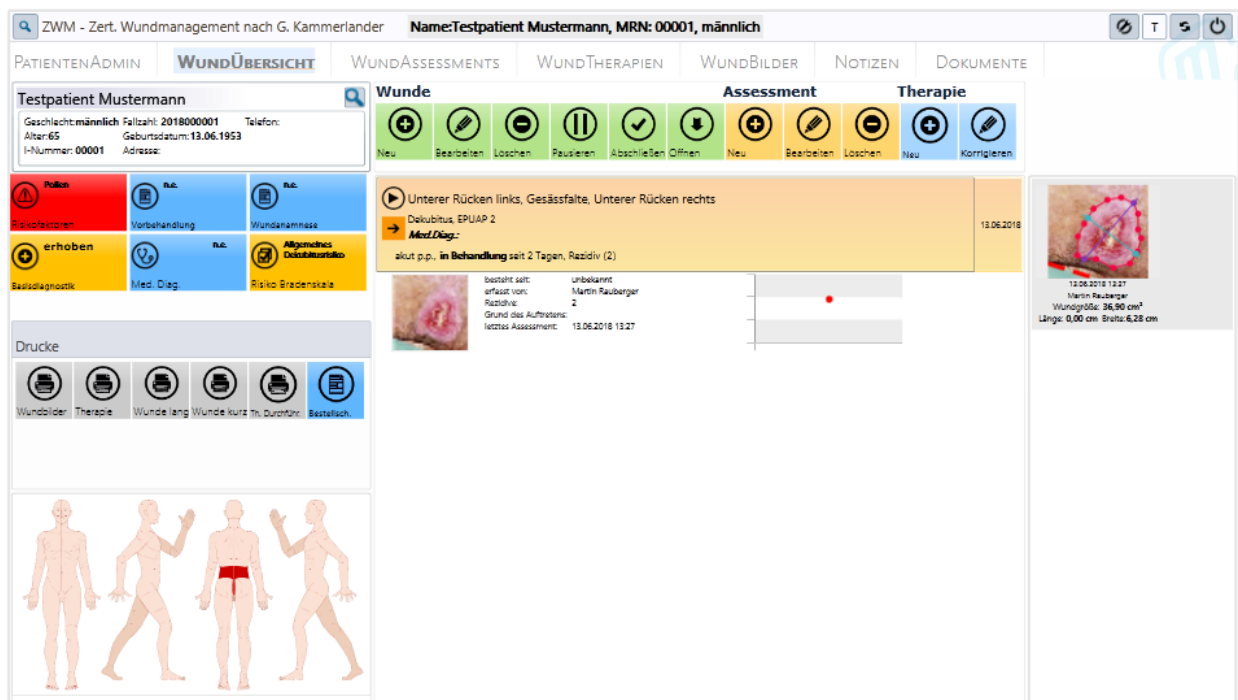

Wundmanagement nach G. Kammerlander

Name: Testpatient Mustermann, MRN: 00001, männlich

PATIENTENADMIN | **WUNDÜBERSICHT** | WUNDASSESSMENTS | WUNDTHERAPIEN | WUNDBILDER | NOTIZEN | DOKUMENTE

Testpatient Mustermann

Geschlecht: männlich | Fallzahl: 2018000001 | Telefon: | Alter: 65 | Geburtsdatum: 13.06.1953 | I-Nummer: 00001 | Adresse: |

Wunde | **Assessment** | **Therapie**

Neu | Bearbeiten | Löschen | Pausieren | Abschließen | Öffnen | Neu | Bearbeiten | Löschen | Neu | Korrigieren

Unterer Rücken links, Gesäßsfalte, Unterer Rücken rechts

Med. Diag.: Dekubitus, EPUAP 2

aktuell p.p., in Behandlung seit 2 Tagen, Rezidiv (2)

besteht seit: unbekannt
erfasst von: Martin Raubinger
Rezidiv: 2
Grund des Auftretens:
letztes Assessment: 13.06.2018 13:27

13.06.2018 13:27
Martin Raubinger
Wundgröße: 36,90 cm²
Länge: 0,00 cm | Breite: 0,00 cm

Drucke

Wundbilder | Therapie | Wunde lang | Wunde kurz | In Druckform | Beispielsch.

Drucke

Wundbilder | Therapie | Wunde lang | Wunde kurz | In Druckform | Beispielsch.

Support?

Sie haben noch **Fragen zu MedCubes** oder benötigen **Unterstützung**?

Bitte kontaktieren Sie direkt Ihren jeweiligen **Ansprechpartner** im MedCubes Team oder wenden Sie sich an unser Sekretariat:

email: office@medcubes.com

telefon: +43 463 328 388 fax DW 99

web: www.medcubes.com

Ihr MedCubes Team 

MedCubes GmbH

Hirschstrasse 4, A-9020 Klagenfurt am Wörthersee

AUSTRIA